



NOVUS™
Nasal CPAP-mask



Hemsjukvård • Novus nasal CPAP-mask




Novus™ nasal CPAP-mask

Novus nasal CPAP-mask är lätt och har en bekväm passform avsedd för vuxna patienter (>30kg) som har fått CPAP- eller bilevelbehandling utskrivet för hemmabruk.


Designad att förse hemsjukvårdspatienter med en lösning som är lätt och bekväm. Novus har ett litet antal delar, som är en fördel när man sätter på och justerar masken. Montering och rengöring är enkel i hemmiljön.

Novus finns i två storlekar med en mjuk silikontätning som har en bekväm passform, som passar de flesta användare.

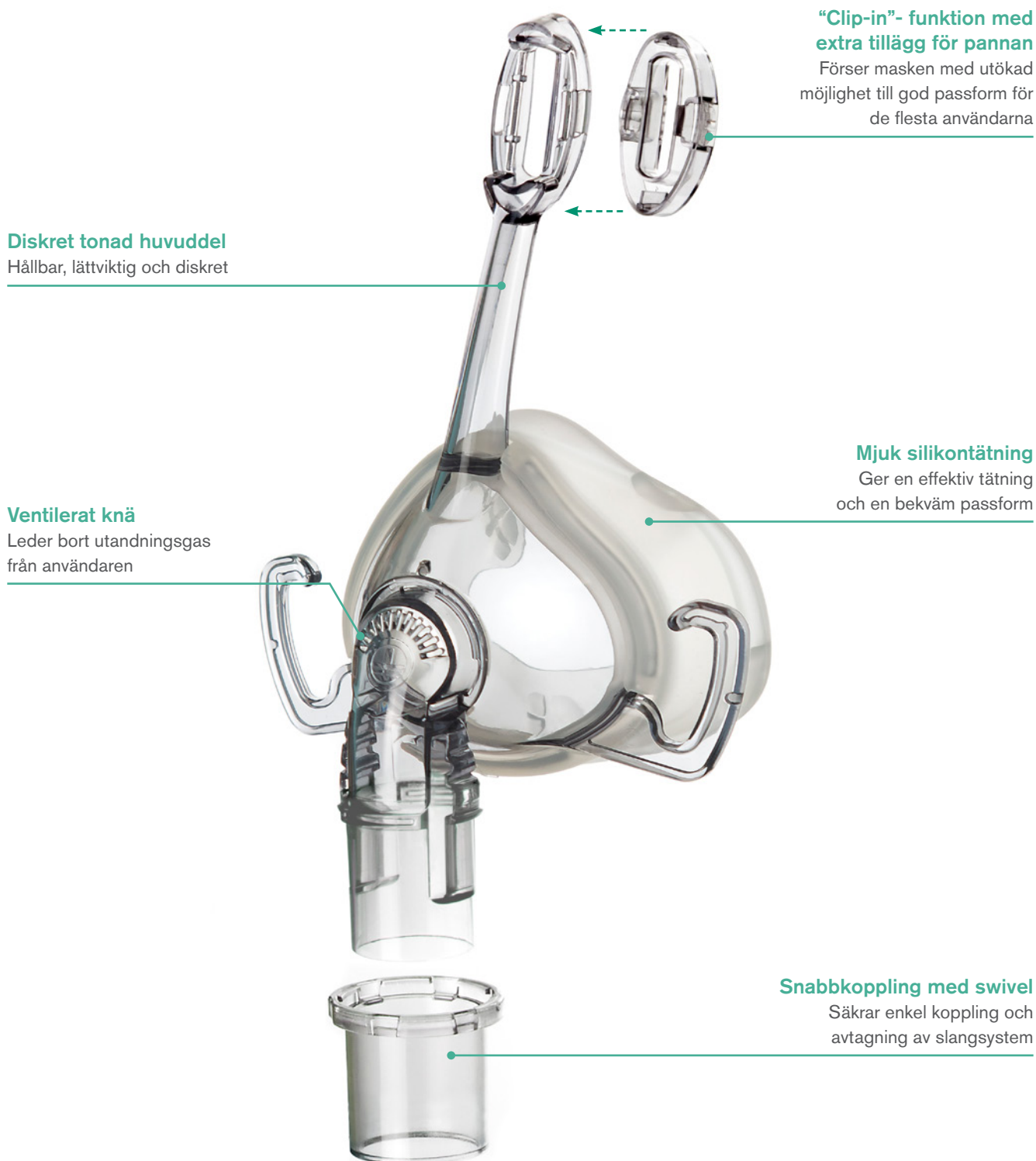



Novus™ nasal CPAP-mask

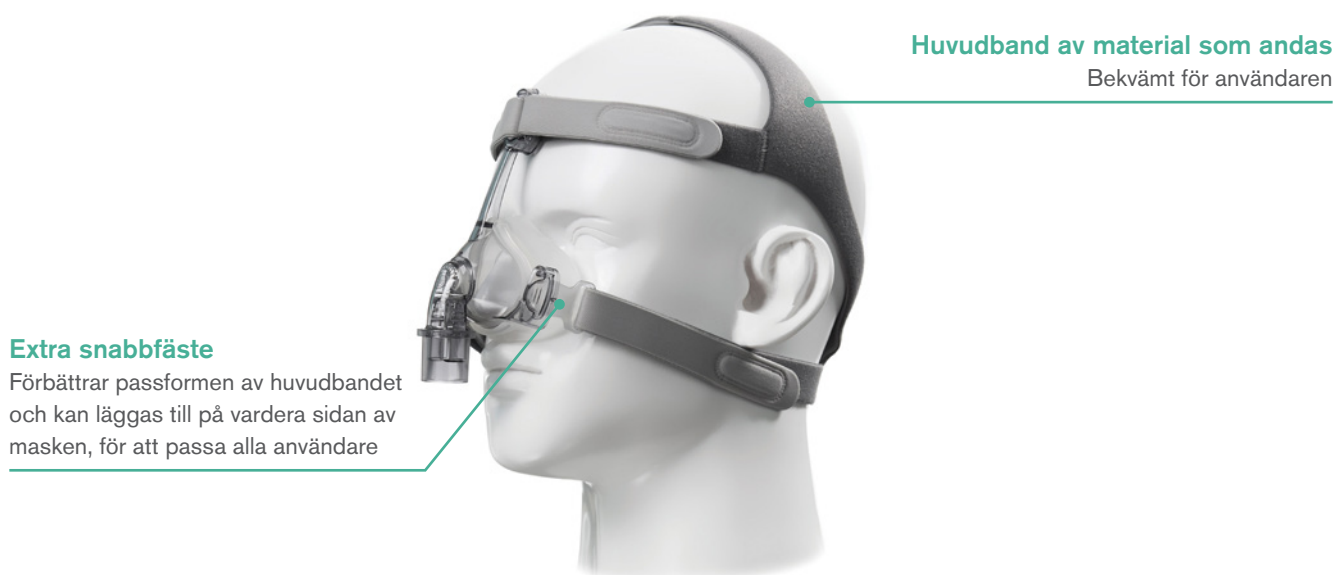

Huvudband av material som andas
Bekvämt för användaren

Extra snabbfäste

Förbättrar passformen av huvudbandet och kan läggas till på vardera sidan av masken, för att passa alla användare

Order information

Novus nasal CPAP-mask finns tillgänglig i två storlekar, medium och large.

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
7771000	Novus nasal CPAP-mask, Large	8
7791000	Novus nasal CPAP-mask, Medium	8

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
7776000	Novus nasal CPAP-mask huvudband (inkluderar huvudband och snabbfäste)	20
5318000	22mm Smoothbore polypropylenslang med mjuka kopplingar, 22F-22F, 1.8m	50
5418000	15mm Smoothbore polypropylenslang med mjuka kopplingar, 22F-22F, 1.8m	60



Utprovning av mask

Hur man uppnår en tät och bekväm mask.



1. Ta bort swivelkopplingen från masken genom att trycka på kopplingens snabbfästen.



2. Sätt på swivelkopplingen på ditt slangsystem.



3. Håll upp huvudband och mask.



4. Sätt masken över näsan och positionera den rätt. Dra försiktigt huvudbandet över huvudet och försäkra dig om att de undre banden placeras under öronen.



5. Kontrollera att banden inte är vridna och fäst det nedre bandet på fästkroken på masken.



6. Justera maskens passform genom att lossa de övre banden, dra dem båda jämnt och sätt åter fast dem. Passformen ska vara säker, men inte för tight.



7. Avsluta anpassningen av masken genom att släppa på de nedre banden, dra dem jämnt och sätt fast dem igen. Passformen ska vara säker, men inte för tight.



8. Försäkra dig om att CPAP-/bivellapparaten är igång. Luft ska flöda från apparatens slang. Sätt fast den monterade swivelkopplingen och slangset till maskens knä genom att klicka det på plats.



9. Om det behövs, släpp på huvudbanden för att undvika luftläckage vid masktätningen. **Spänn inte fast masken för hårt.** Om läckage består, lyft på maskens tätning från näsan och placera om den innan huvudbanden justeras.

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS1.44 SE • Issue 3 11.24



Intersurgical AB, Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sweden
T: 08 514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tillverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001