



VariFit™

Mask för NIV och CPAP/Bi-Level



Intensivvård • Masker



VariFit™ med kuff av AIR°gel®

VariFit är en NIV-mask för enpatientsbruk avsedd för sjukhusmiljö. Kuffen är av AIR°gel® vilket ökar patientkomforten tack vare det mjuka materialet och följsam passform. Färgkodade kopplingar hjälper användaren att enkelt välja rätt produkt för Bi-Level/CPAP eller NIV-behandling beroende på om ett enslangssystem eller tvåslangssystem används. Huvudbandet är tillverkat av ett material som andas och utformat för att passa alla typer av huvudformer. Med snabbspänne för enkel användning av masken.

▶ Video tillgänglig på www.intersurgical.se

AIR°gel® Bekväm passform och låg vikt
Mjuk och följsam med AIR°gel® som minimimerar tryckpåverkan och hudirritation

Avancerat utformad kuff


Den ergonomiskt utformade kuffen skapar en tät försegling och en bekväm passform

Praktiskt spänne på huvudbandet

Kopplingen är rörlig och anpassar sig efter patientens rörelser för att säkerställa en tät försegling

360° roterande vinkelkoppling

Ger optimal positionering av slangar och ökar patientens rörlighet

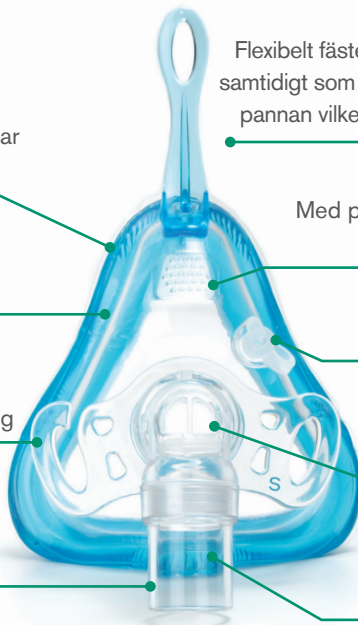

Flexible Spacebar™

Flexibelt fäste för huvudbandet som skapar mycket bra stabilitet samtidigt som den täta förseglingen bibehålls. Ingen kontakt med pannan vilket undviker risk för skavsår och besvär för patienten.

Ventilerad mask (gäller urval av sortimentet)

Med port och antikvävningsventil (AAV) för användning vid CPAP/Bi-Level

Syrgasport

Möjliggör tillförsel av extra O₂

Antikvävningsventil (AAV)

Förhindrar återandning vid otillräcklig ventilation

Färgkodade vinkelkopplingar

Underlättar val av rätt produkt beroende på typ av behandling och övrig utrustning

Artikelnummer	Beskrivning	Färgkodad vinkelkoppling	Förpackningsstorlek
För användning med enslangssystem som inte har CO₂ läckageport			
2260000	VariFit ventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, small	○	8
2261000	VariFit ventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, medium	○	8
2262000	VariFit ventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, large	○	8
2277000	VariFit ventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, extra large	○	8
För användning med enslangssystem som har CO₂ läckageport			
2263000	VariFit oventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, small	◐	8
2264000	VariFit oventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, medium	◐	8
2269000	VariFit oventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, large	◐	8
2278000	VariFit oventilerad NIV-mask med antikvävningsventil (AAV), vuxen, extra large	◐	8
För användning med tvåslangssystem			
2265000	VariFit oventilerad NIV-mask, vuxen, small	●	8
2266000	VariFit oventilerad NIV-mask, vuxen, medium	●	8
2267000	VariFit oventilerad NIV-mask, vuxen, large	●	8
2279000	VariFit oventilerad NIV-mask, vuxen, extra large	●	8



AIRgel är ett av Sleepnet Corporation registrerat varumärke. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology and Active Headgear Connector är av Sleepnet Corporation registrerade varumärken.



Please recycle

IS1.41 SE • Issue 5 10.17