




Cirrus™ 2

Nebulisatorer och tillbehör för aerosolbehandling

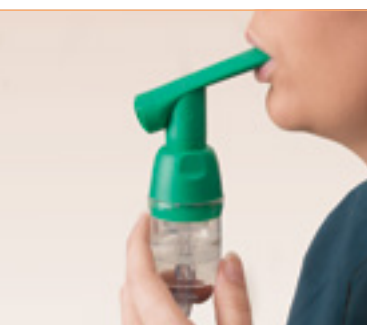

Oxygen och aerosolbehandling • Nebulisatorer

Cirrus™2 nebulisator och masker

Cirrus2 är en vidareutveckling av nebulisatorn Cirrus som ger förbättrad funktion. Residualvolymen är lägre för att minimera spill av läkemedel och koppen är graderad för att mängden av tillgängligt läkemedel tydligt skall framgå.


Koppen har en snabbkoppling och monteras enkelt på eller av genom att snurra ett kvarts varv.

Detta underlättar att fylla koppen och ger en säkrare försegling mellan koppen och nebuliseringslocket.

▶ Se instruktionsvideo på www.intersurgical.se

Cirrus™2 är utformad för att leverera läkemedel som verkar tracheobronkialt. Vid ett flöde på 8 L/min är partiklarnas Mass Median Diameter (MMD) 3,3 mikrometer.

Cirrus™2 nebuliseringskit med mask för vuxna innehåller Intersurgical EcoLite inhalationsmask. Inhalationsmasken är PVC-fri och minskar klimatpåverkan med 28% jämfört med en traditionell PVC-mask.

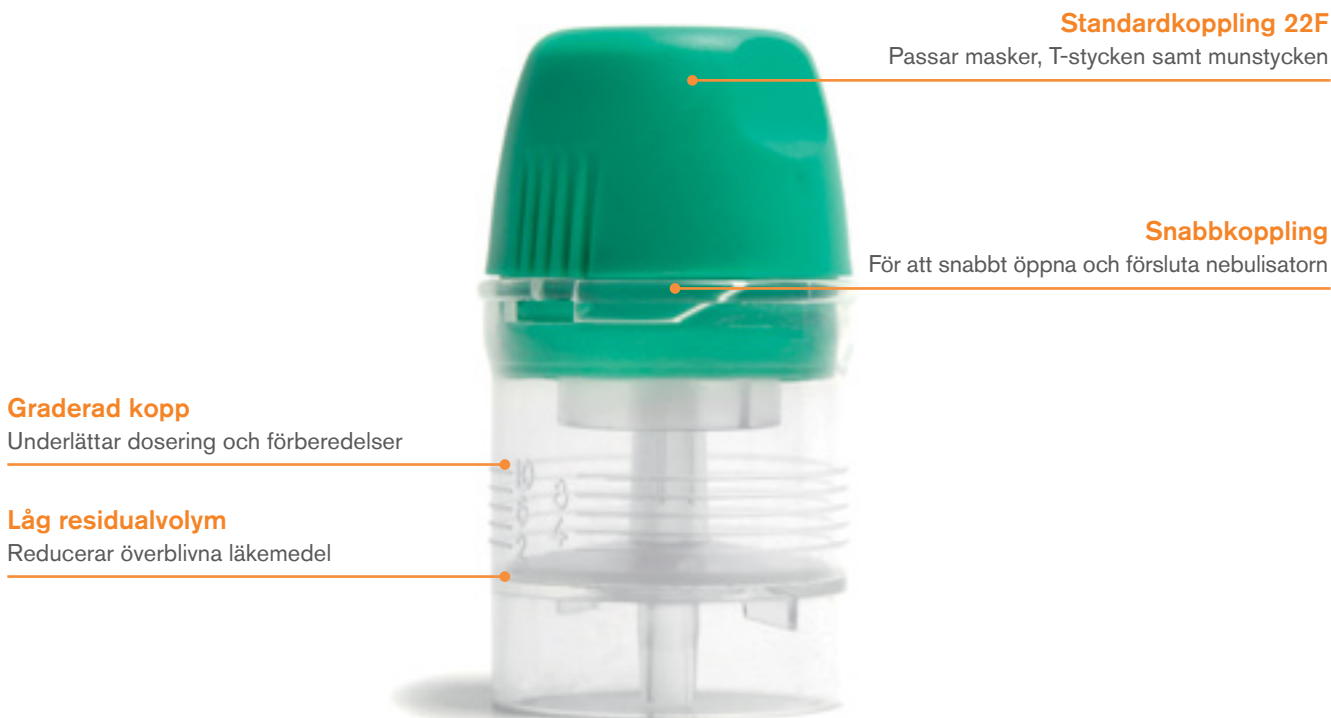

Självförslutande T-stycke

Cirrus2 finns nu tillgänglig med självförslutande T-stycke vilken kan kopplas i patientens andningskrets vid ventilatorbehandling. Koppen kan monteras på och av utan att riskera att ventilationen avbryts eller att onödiga alarm löser ut.

▶ Se instruktionsvideo på www.intersurgical.se





Kompleta kit med den nya Intersurgical EcoLite inhalationsmasken

Intersurgical EcoLite inhalationsmask är utformad i enlighet med vårt pågående arbete med hållbar utveckling, vilket är en väsentlig del av företags värdegrund.

Intersurgicals Eco-sortimentet innehåller PVC-fria maskor som ger användaren en möjlighet att välja mindre miljöpåverkande produkter än traditionella inhalationsmasker.

Förbättrad komfort för patienten - Låg vikt och mjuka, utformade för att vara bekväma för patienten.

Maskerna är tillverkad med innovativ teknologi där två material kombineras. Masken är gjord av ett formstabil material som är starkt, av låg vikt och genomskinligt för full synbarhet. Förseglingen mot ansiktet är gjord av ett mjukt och skonsamt material som sluter tätt vid behandling och passar en stor variation av ansiktsformer.



Anatomiskt formad försegling mot näsan

Anpassad för olika ansiktsformer. Säkerställer att masken är tät och att patienten inte besväras av syrgas eller läkemedel i ögonen. Utformningen

Ingen näsklämma av metall

MR-kompatibel

Mjuk kuff mot ansiktet

Mer bekvämt för patienten

Fästbandet kan placeras ovanför eller under öronen

Vid placering under öronen elimineras risken för tryck- och skavsår

Alternativa placeringar av masken

Säkerställer bra passform på stor variation av ansiktsformer

Se instruktionsvideo på www.intersurgical.se



Skonsamt för miljön

Många ifrågasätter användning av PVC i medicintekniska produkter dess påverkan på miljön Intersurgicals målsättning är att ständigt utveckla produkter och processer för att värna om miljön. Intersurgical har kunnat utveckla en PVC-fri mask med nya material och innovativa produktionstekniker och därmed dramatiskt reducerat negativ miljöpåverkan.



www.intersurgical.com/info/eco

Cirrus™2 nebulisator och kompletta kit med mask

Artikelnummer	Beskrivning	Slanglängd	Förpackningsstorlek
1402000	Cirrus2 nebulisator		75
1453015	Cirrus2 nebulisator, Intersurgical EcoLite™ med slang, vuxen	2.1m	30
1453017	Cirrus2 nebulisator, Intersurgical EcoLite™ med PVC-fri slang, vuxen	2.1m	30
1454015	Cirrus2 nebulisator, Intersurgical EcoLite™ med slang, barn	2.1m	36
1455000	Cirrus2 nebulisator, munstycke med slang	2.1m	35
1464000	Cirrus2 nebulisator, T-stycke, munstycke och slang		40
1464004	Cirrus2 nebulisator, T-stycke, munstycke och slang med Sure Loc		20
1464021	Cirrus2 nebulisator, T-stycke, vinklat munstycke och slang	2.1m	20
2605000	Cirrus2 nebulisator, T-koppling till andningssystem, 22mm		40
2606000	Cirrus2 nebulisator, T-koppling till andningssystem, 15mm		35
2608000	Cirrus2 nebulisator, T-koppling till andningssystem, 10mm		45
1958000	Cirrus2 nebulisator, föroreningskydd		20

Självförslutande T-stycke

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2609000	Cirrus2 nebulisator, självförslutande T-koppling för andningssystem, 22mm	35
1814000	Självförslutande T-koppling (in-line) 22M-22F, 22M	40

Förfrågan

Produkt med minskad miljöpåverkan
 Please think before you print Save energy and paper. If you must print this information sheet please print it double sided.



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
 T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2015



The distributor Intersurgical AB is certified to ISO 9001

IS10.23 • Issue 9 04.18