



i-flo™ högflödesgrimma



Intensivvård • i-flo högflödesgrimma



i-flo™ högflödesgrimma

i-flo är en engångsprodukt avsedd för högflödesbehandling. Den är avsedd att behandla vuxna patienter med andningssvikt i sjukhusmiljö och finns i tre storlekar.

Högflödesbehandling har blivit ett vanligt förekommande andningsstöd för patienter med andningssvikt och det har konstaterats att denna behandling erbjuder en rad fördelar gentemot konventionell syrgasterapi. Bland dessa fördelar inkluderas följande:

- Förbättrad syresättning
- Minskad andningsbelastning
- Minskad sekretion
- Ökad behandlingstolerans hos patient
- Undvikande av intubering^[1]

i-flo kompletterar Intersurgicals breda sortiment av andningssystem och lösningar inom intensivvård och dess diskreta design har utvecklats med fokus på prestation och patientkomfort.


i-flo innehåller ett antal unika egenskaper och fördelar som säkerställer bäst möjliga leverans av högflödesbehandling.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



Anpassningsbar och säker

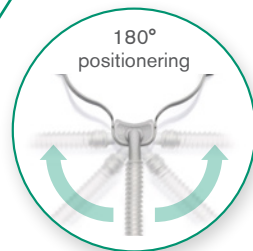

i-flo's unika 180° swivelkoppling möjliggör enkel och bekväm positionering av utrustning vid sidan av sängen.



i-flo's kläm- och fästbandssystem stödjer andningssystemets slangar på ett säkert sätt och låter patienten röra sig fritt utan att tänka på om grimmans kommer på fel plats eller blir obekvämt.

Bekvämt och stödjande



En anatomisk design av näsbygeln styr huvudbandet ovan patientens öron, hjälper till att minimera skav och dålig passform.

Den flexibla, semistyva näsbygeln möjliggör att trycket från bandet fördelas jämnt över patientens kinder. Detta höjer grimmans stabilitet och stöd samt hjälper till att undvika att tryckpunkter uppstår.



i-flo™ högflödesgrimma

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
7300000	i-flo högflödesgrimma, small vuxen	7
7301000	i-flo högflödesgrimma, medium vuxen	7
7302000	i-flo högflödesgrimma, large vuxen	7





Gör en förfrågan

Se video



Andningssystem, enkelslang

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2060310	22 mm Flextube 1,6 m med värmetråd inkl. befuktningskammare och extra slang 0,5 m	7

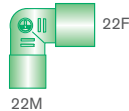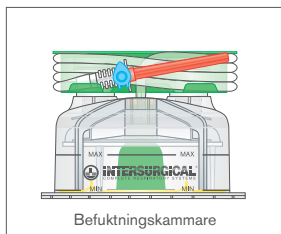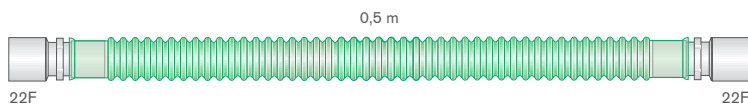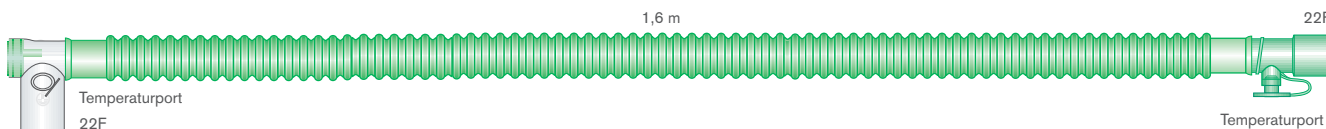

Skriv bara ut om du behöver. Spara på papper och miljö.

IS1.53 SE • Issue 4 01.25



Intersurgical AB, Kistagången 20b, 164 40 Kista, Sweden
T: 08 514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tilverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och MDSAP



Intersurgical AB är certifierad enligt ISO 9001

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA